

Инструкция по запуску клиентского приложения LIMS myLab в Ред ОС версии 7.3.

Запуск терминала

Переключение на суперпользователя root (требуется пароль)

```
su root
```

Установка Wine

```
dnf install wine
```


Переключение на текущего пользователя

```
exit
```

Запуск конфигурации Wine

```
winecfg
```

Выбор версии Windows (Windows 10) по умолчанию

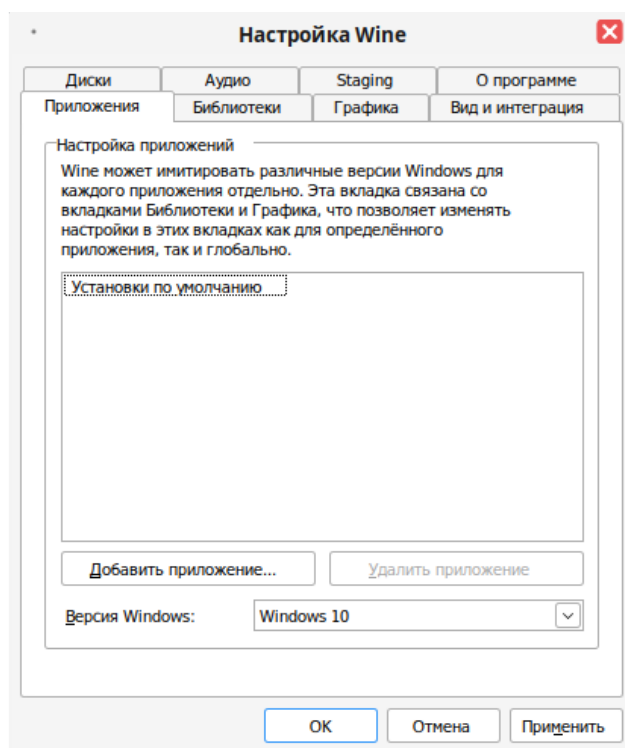

Создание 32-х разрядного префикса

```
WINEARCH=win32 WINEPREFIX="/home/$USER/.wine_prefix" winecfg
```

Переключение на суперпользователя root (требуется пароль)

```
su root
```

Установка Winetricks

```
dnf install winetricks
```

Переключение на текущего пользователя

```
exit
```


Установка .Net Framework 4.8

```
winetricks --force -q dotnet48
```


Далее терминал более не понадобится.




Установка LIMS myLab




Установка программы производится через стандартный установщик LIMS myLab (необходимо выбрать из контекстного меню пункт «Открыть в Wine – загрузчик Windows программ»).

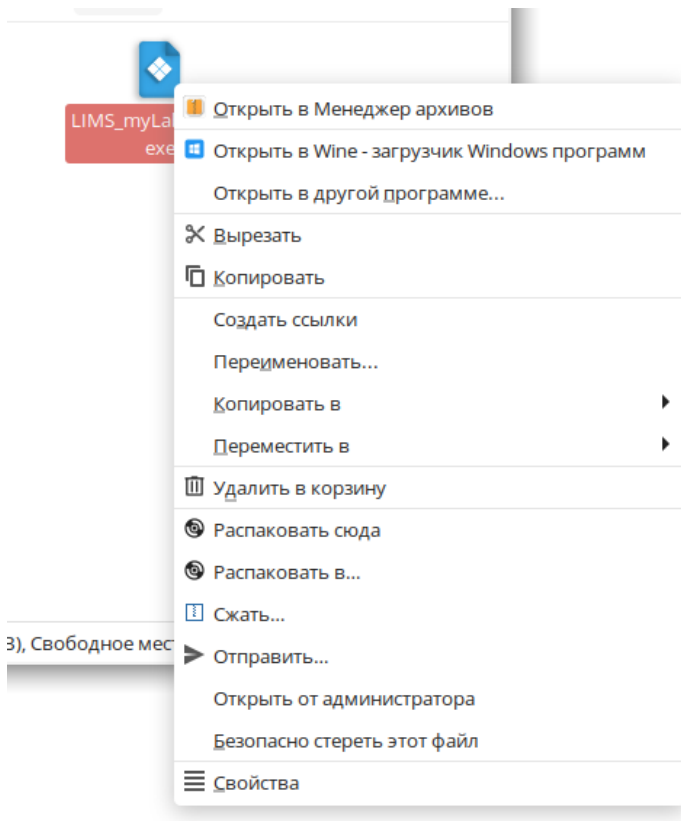


Далее идет стандартный процесс установки

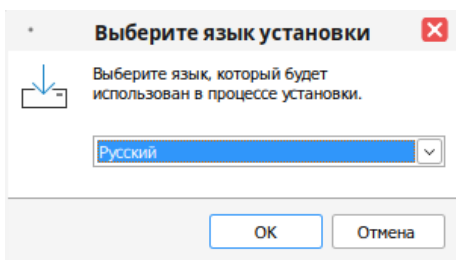

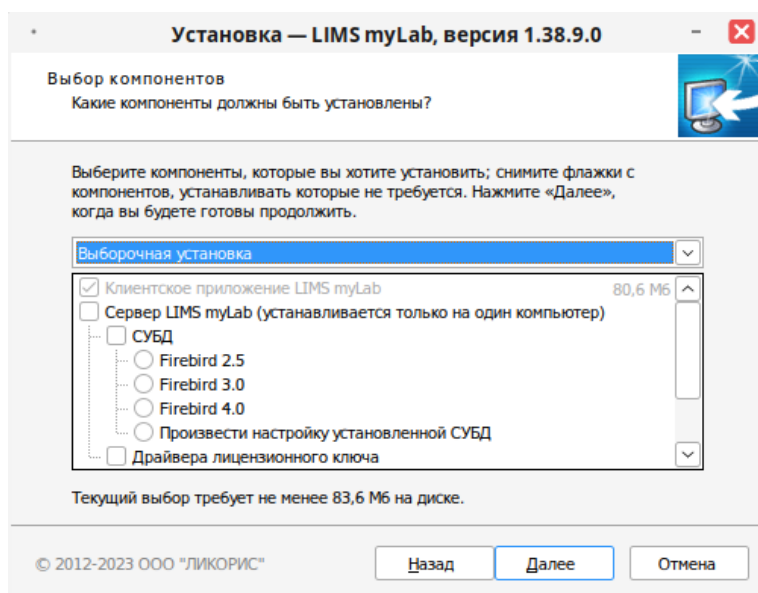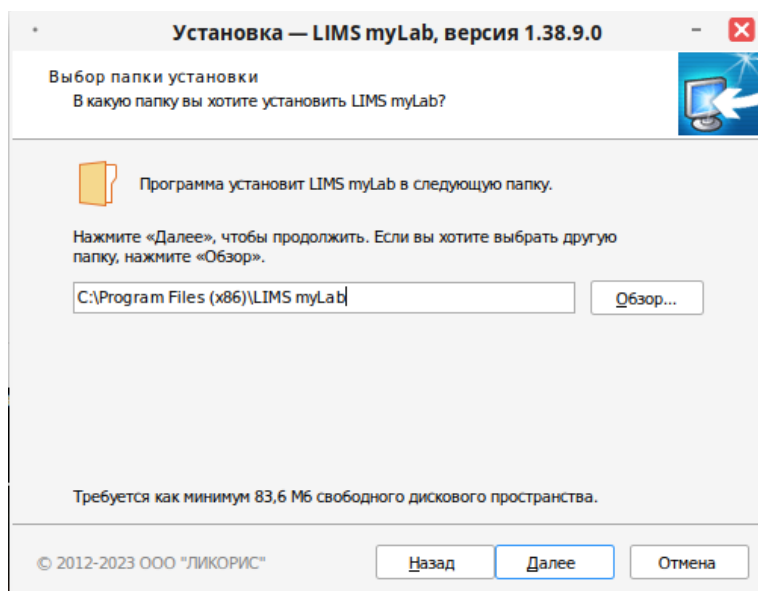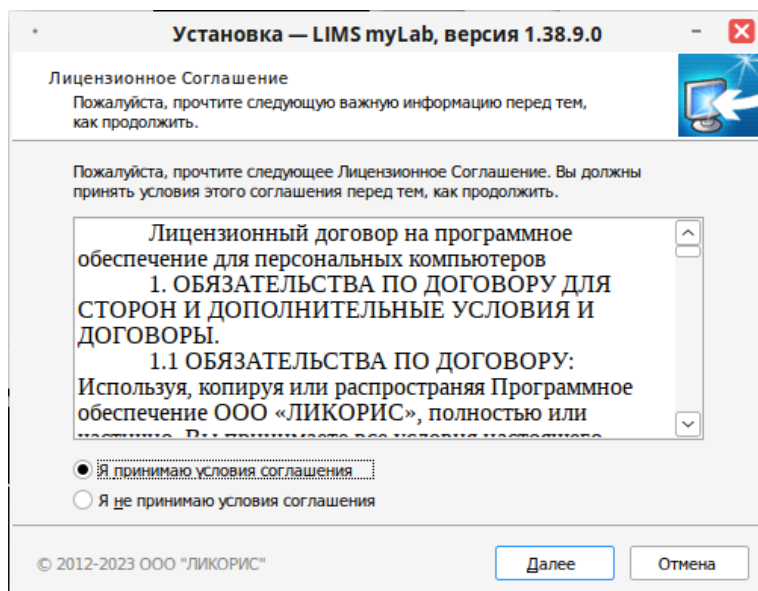


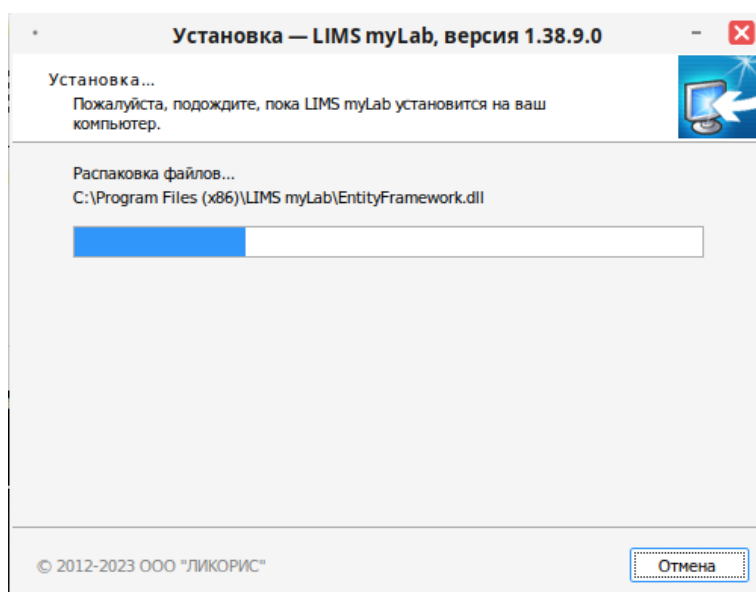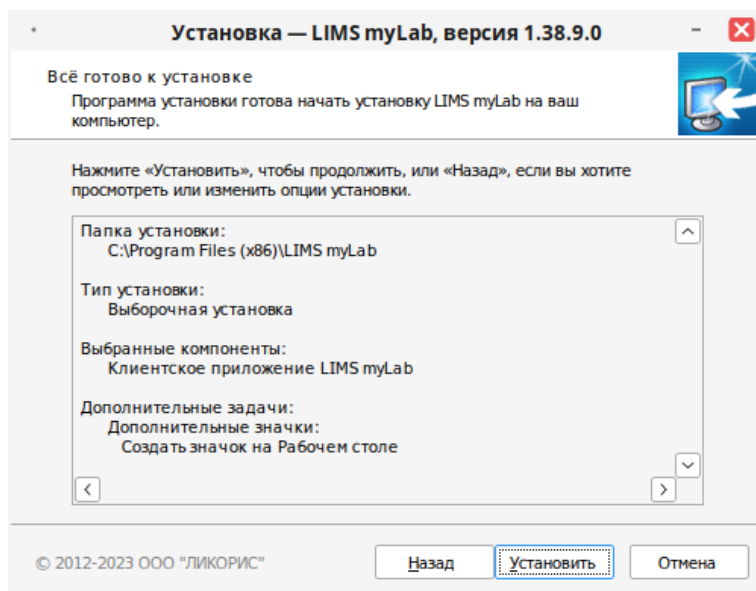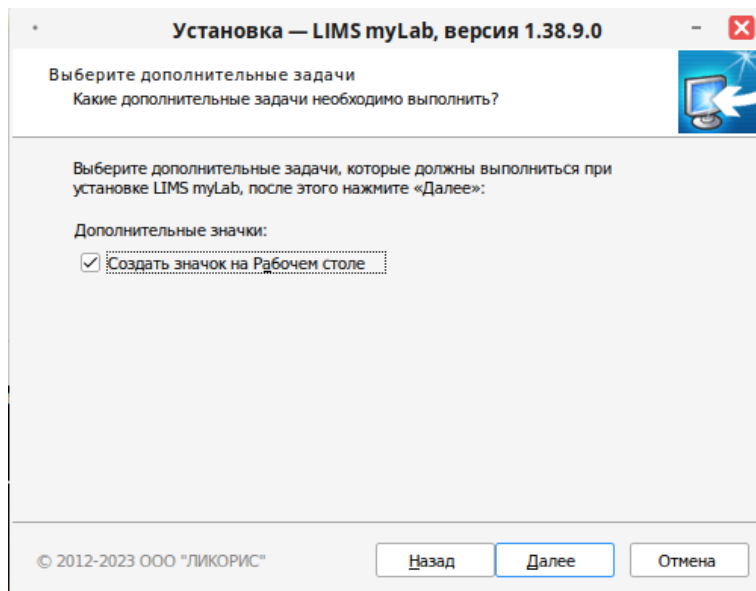

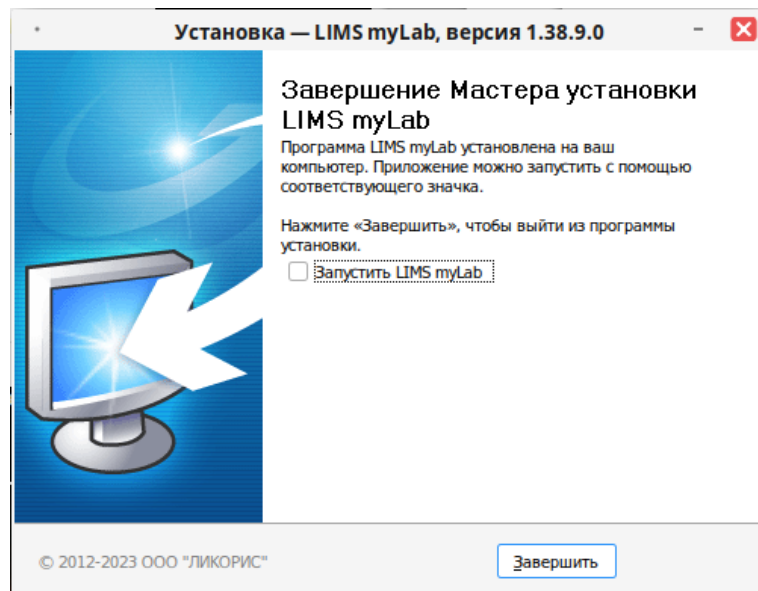


Запуск LIMS myLab

Запуск программы происходит через соответствующую пиктограмму, которая появится на рабочем столе

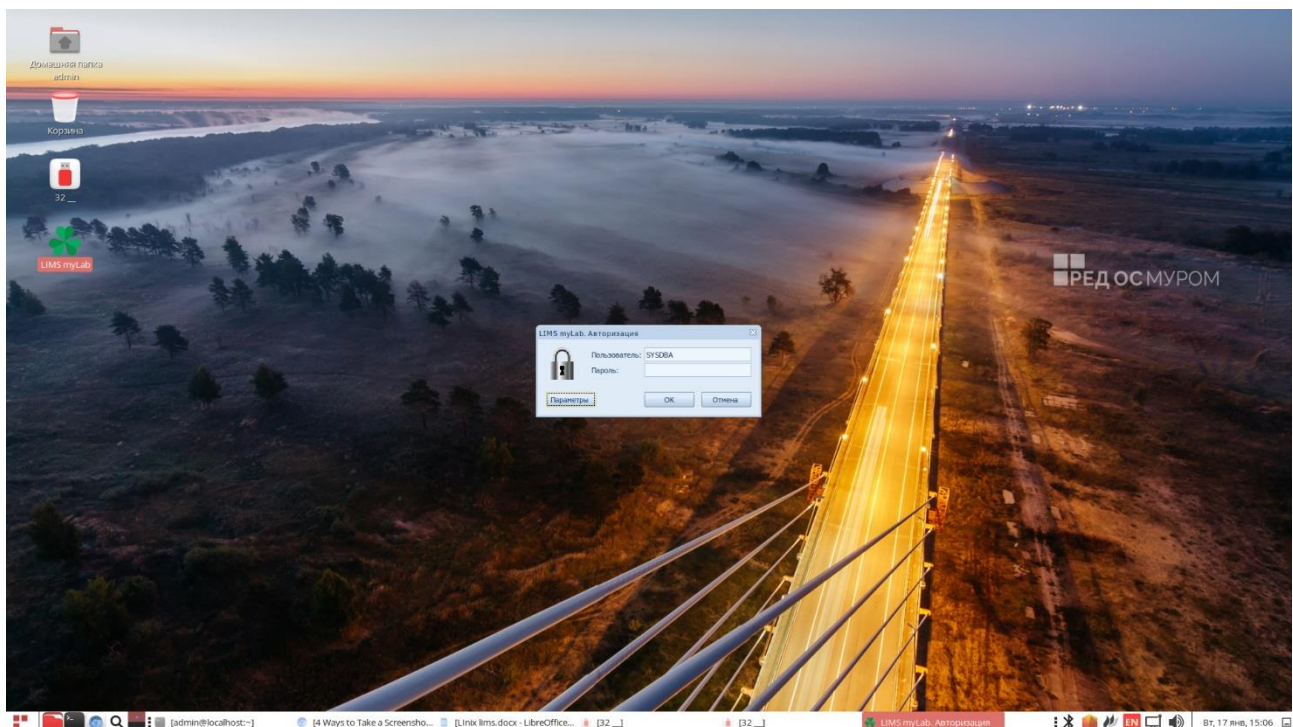

При первом запуске программы необходимо установить Wine Gecko

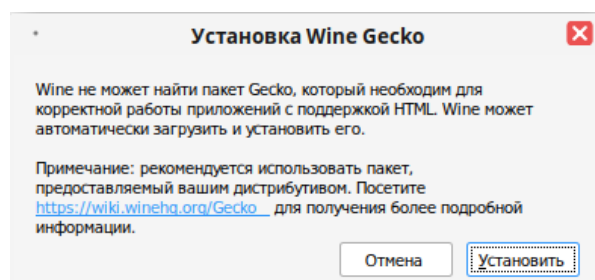

Программа готова к работе в Ред ОС

