

Инструкция по запуску клиентской программы в Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.7)

Программа LIMS myLab написана для работы в операционных системах семейства Windows. Но программу можно запустить и на Linux.

1. Необходимо установить Wine на ОС Astra Linux. Подробная инструкция описана в [справочном центре Astra Linux](#). Обращаем ваше внимание, что по умолчанию Wine установится в репозиторий **opt**. Для корректной работы необходимо создать символическую ссылку в директорию пользователя. Пример:

```
sudo ln -s /opt/wine-7.13/bin/wine /home/usr/bin/.wine
```

2. Запускаем winetricks командой:

```
winetricks
```

Необходимо установить дополнительную библиотеку .Net Framework 4.8.

3. Установка LIMS myLab.

Установка программы производится через стандартный установщик LIMS myLab. Перезагрузите систему.


4. Запуск LIMS myLab

Запуск программы происходит через соответствующую пиктограмму, которая появится на рабочем столе после установки программы.

Если при запуске появляется сообщение «Доступ запрещен», необходимо выполнить следующие операции. Для устранения данной ошибки отключить блокировку трассировки ptrace. В «Терминале Fly» ввести следующую команду:

```
sudo astra-pttrace-lock disable
```

Для вступления в силу изменения блокировки ptrace требуется перезагрузка системы. Более подробно описаны вопросы по работе Wine в ОС Astra Linux в статье [Wine: часто задаваемые вопросы](#).

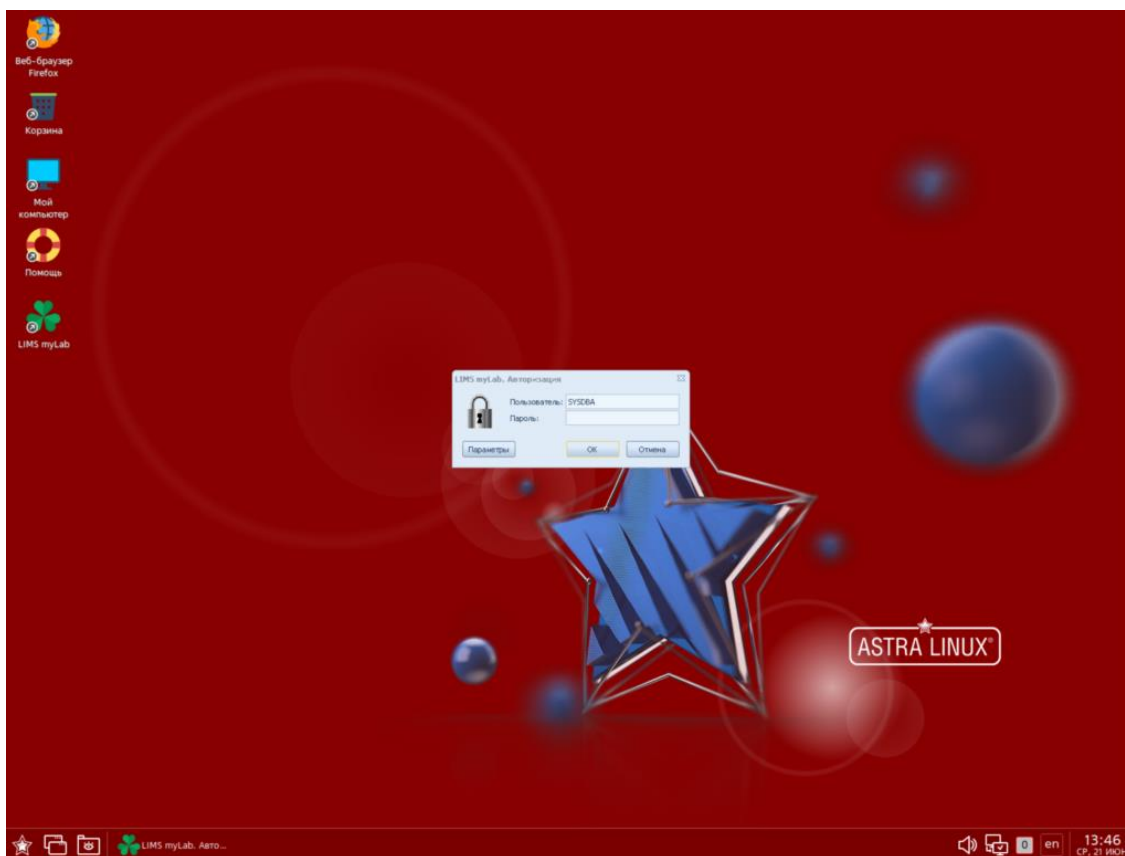

5. Программа готова к работе в ОС «Astra Linux Special Edition» (очередное обновление 1.7).

