

Инструкция по запуску клиентской программы в Ред ОС версии 8

Программа LIMS myLab написана для работы в операционных системах семейства Windows. Но программу можно запустить и на Linux.

1. Запуск терминала

2. Переключение на суперпользователя root (требуется пароль)

```
sudo su root
```

3. Установка Wine

```
dnf install wine
```


4. Переключение на текущего пользователя

```
exit
```

5. Запуск конфигурации Wine

```
winecfg
```

6. Выбор версии Windows (Windows 10) по умолчанию

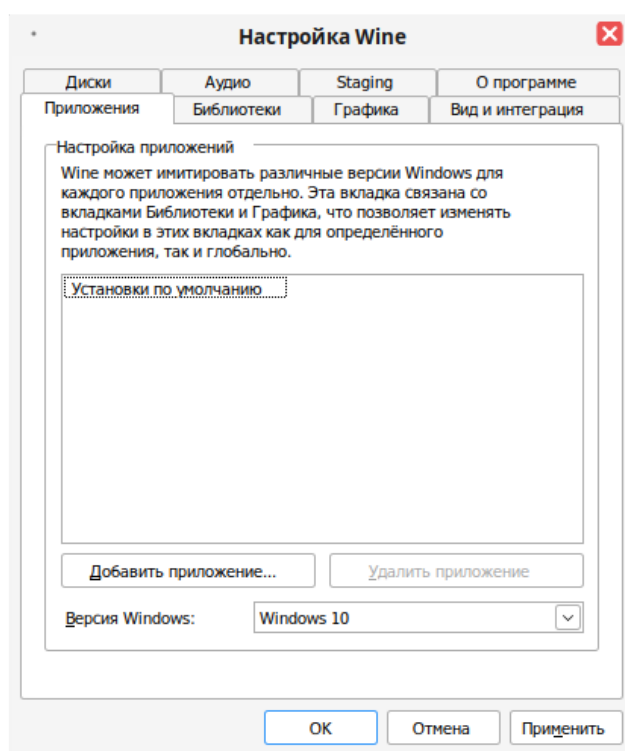

7. Создание 32-х разрядного префикса

```
WINEARCH=win32 WINEPREFIX="/home/$USER/.wine_prefix" winecfg
```

8. Переключение на суперпользователя root (требуется пароль)

```
sudo su root
```

9. Установка Winetricks

```
dnf install winetricks
```

10. Переключение на текущего пользователя

exit


11. Установка .Net Framework 4.8

wineutils --force -q dotnet48


Далее терминал более не понадобится.




12. Установка LIMS myLab




Установка программы производится через стандартный установщик LIMS myLab (необходимо выбрать из контекстного меню пункт «Открыть в Wine – загрузчик Windows программ»).

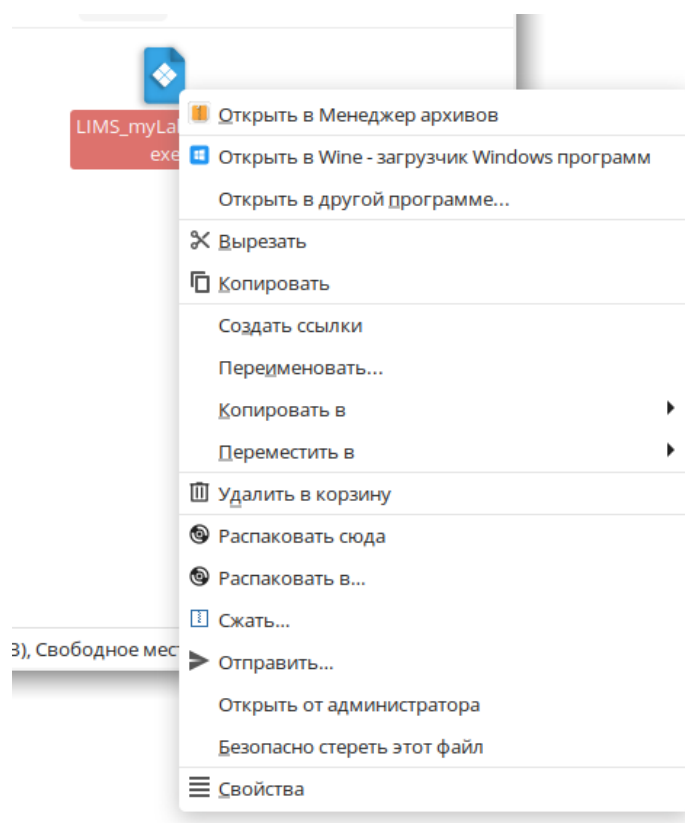


Далее идет стандартный процесс установки

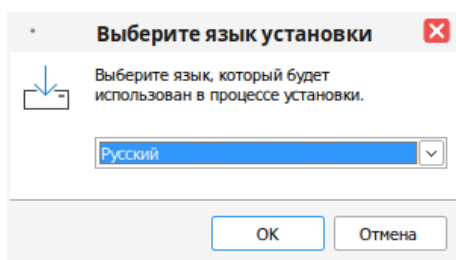

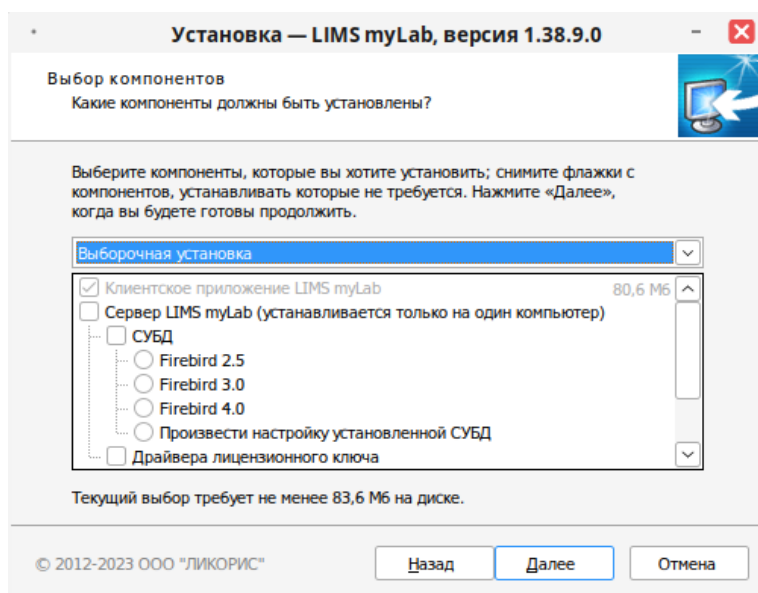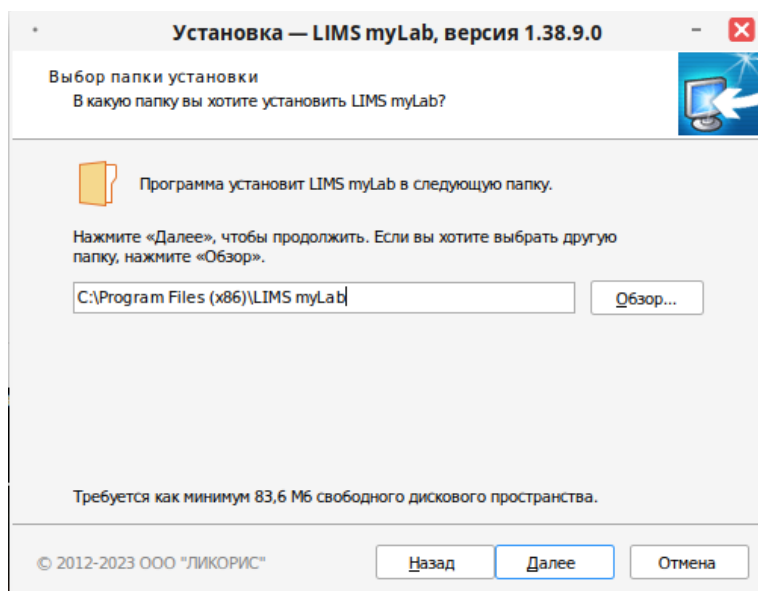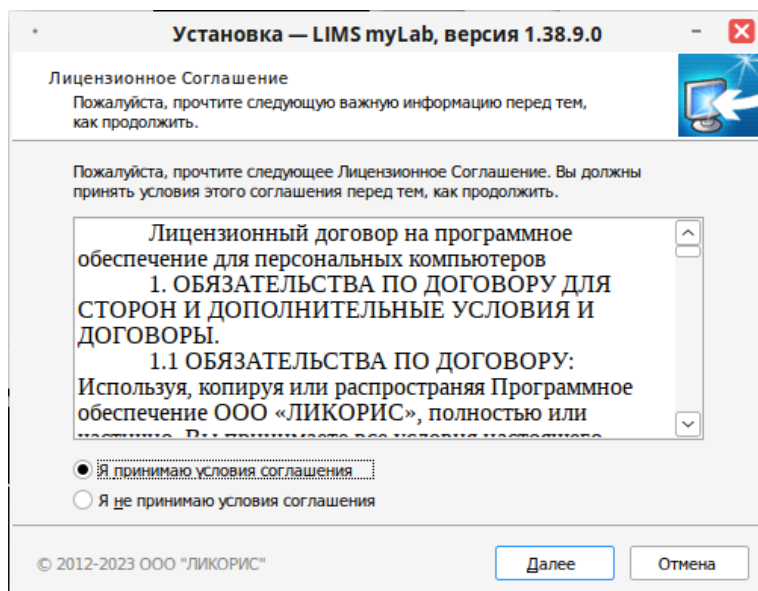


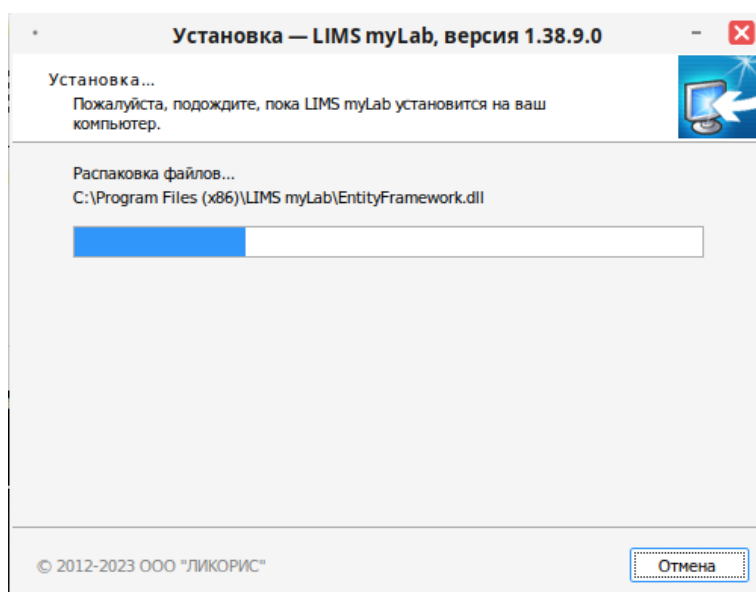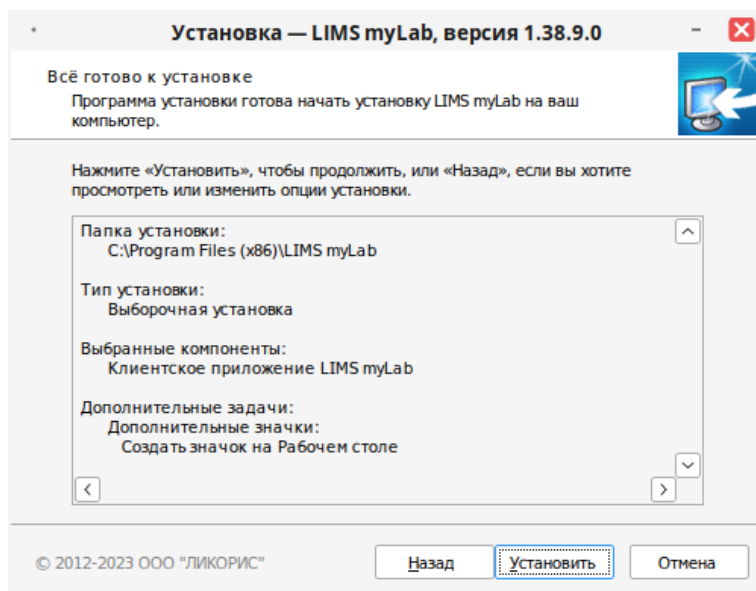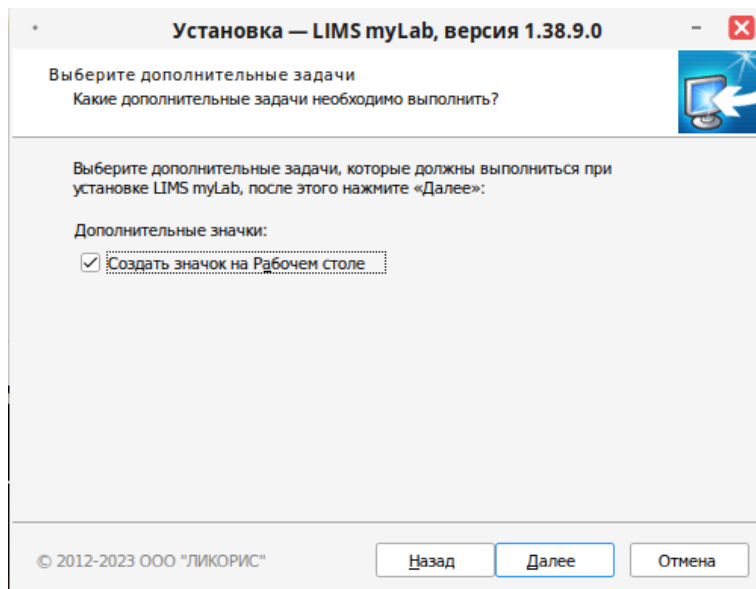

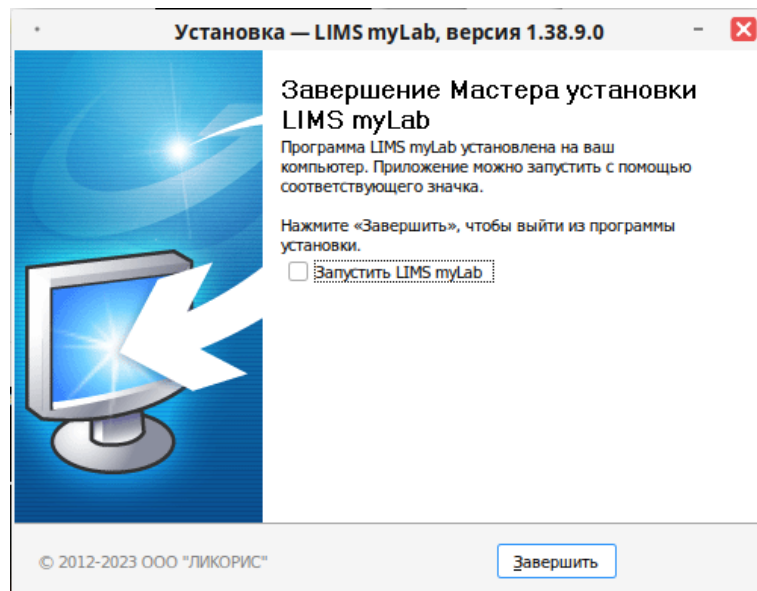


13. Запуск LIMS myLab

Запуск программы происходит через соответствующую пиктограмму, которая появится на рабочем столе

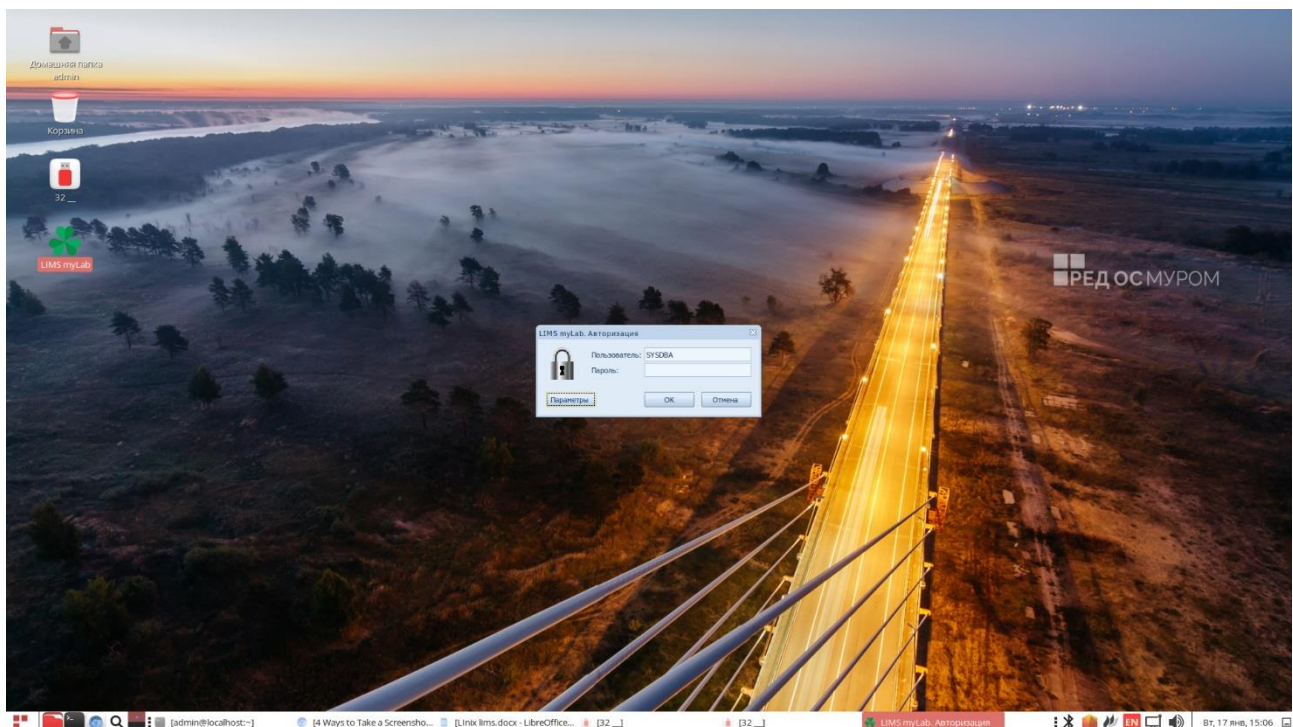

При первом запуске программа предложит установить Wine Gecko. Установка обязательная.

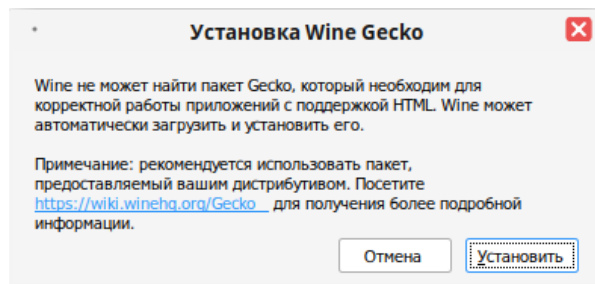

14. Программа готова к работе в Ред ОС

